


Pioneer

簡単マニュアル

ボイス モニタリング レシーバー

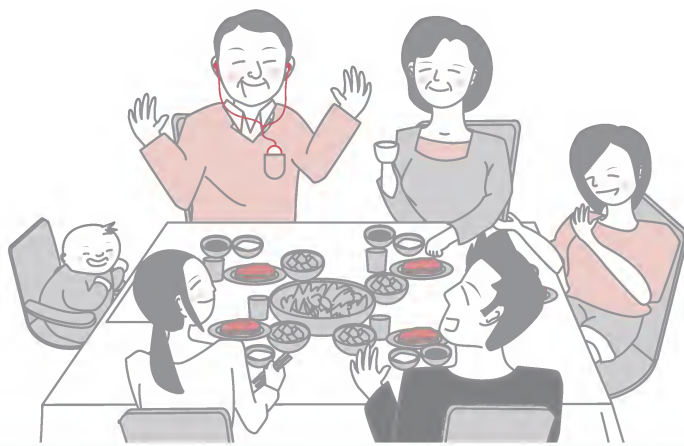

いい音と、いつまでも。

femimi

VMR-M800


① 充電

本機をはじめて使うときは、必ず充電してください。
専用の充電機を本機に入れて、付属の充電器に置くだけで充電できます。

！ 充電は付属の専用充電機で行ってください。
市販の充電機や乾電池では充電できません。

1. 電池を入れる


① 電池ぶたを開ける

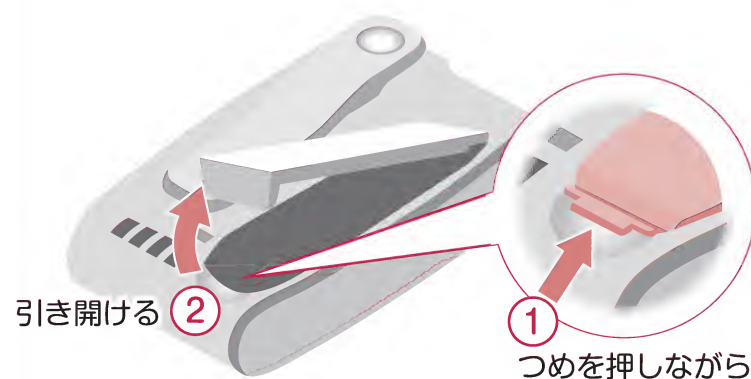

② 付属の充電機を入れる




③ 電池ぶたを閉じる

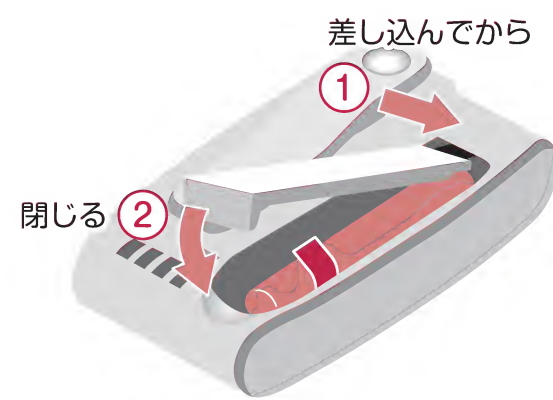

2. 充電する

① 充電器と AC アダプターを接続し、
コンセントに差し込む

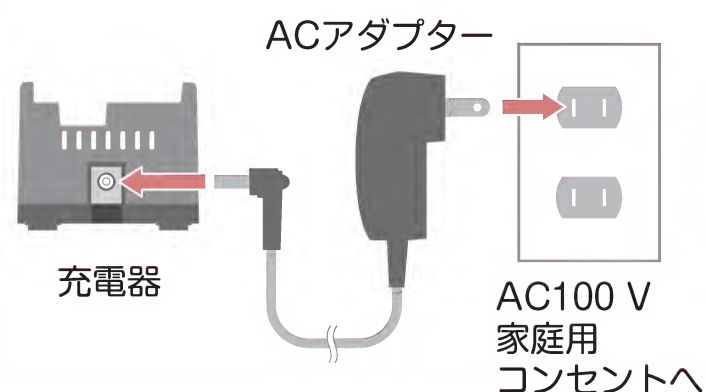

② 充電器に
本体を置く

カチッとハマる
まで押し込む



③ 充電ランプが点灯したら
充電中です
充電時間：最大 3.5 時間

消灯したら充電完了


！ ご注意.....
充電ランプが点滅しているときは正常に充電されていません。
付属の専用充電機が本体に正しく入っているかをご確認ください。

② 準備

ご使用になる前に、付属のイヤホンマイクのつけ心地を確認してください。
また、本機を首から下げて使用するときには、ストラップとポーチを取り付けます。



イヤホンマイクを耳に合わせてみる

イヤホンマイクの右(R)・左(L)を確認し、
耳の奥まで差し込んでください。

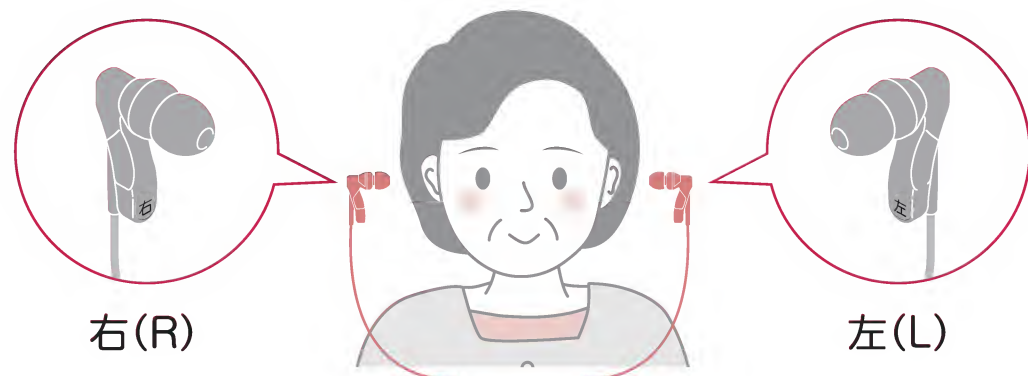

イヤホンマイクが耳穴に合わないときは

お好みのイヤホンチップに交換してください。
サイズはXS、S、M、Lの4種類あります。

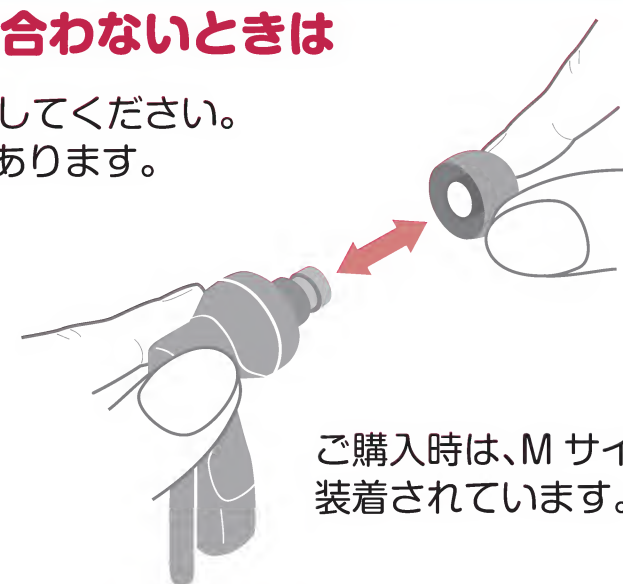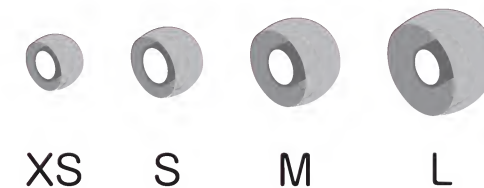

ご購入時は、M サイズが
装着されています。

ストラップをつける

本体にストラップを
つけるときは

ストラップ穴に
ストラップの
ひもを通す。



ポーチにストラップを
つけるときは

収納ポーチ



ポーチの中に本体を
入れて、首から下げる
ことができます。



③ 使う

まずは電源を入れて、周りの音を聞きながら音量を調整してみましょう。
慣れてきたら、使用する場面に合わせて、4つの聴こえモードを使い分けてください。

1. 電源を入れる

- ①イヤホンマイクを本体に差し込む
イヤホンマイクジャック
カチッと
なったら OK
- ②音量つまみを「2」に合わせる
音量つまみ
音量 大 0 2 4 小
- ③イヤホンマイクを耳に付ける
- ④電源ボタンを押す
電源ランプが青色に点灯
電源ボタン

2. 音量を調整する

- 音量つまみを回し、音量を調整する
- 左右の音量が違うときは**
音量が左右均等になるよう、バランス調整します。
- 音量つまみ
音量 大 0 2 4 小
- バランス
右が小さくなる 左が小さくなる
- 電池カバーを開けて、調整つまみを回します。


3. 使用する場面に合わせて聴こえモードを変える

聴こえモードとは

使用する場面に合わせて音声を変わります。
次の4つのモードから選ぶことができます。

通常モード

日常生活で使用する時

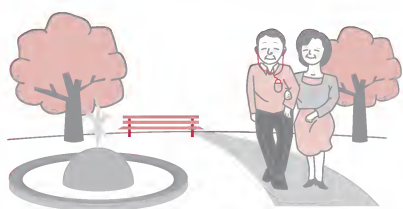

会話モード

会話や会議で使用する時



テレビモード

音楽やテレビを鑑賞する時



電話モード

通話する時



現在の聴こえモードを確認するときは

- ①モードボタンを押す
モードランプが点灯
モードボタン
- ②モードランプの色を確認する
モードによってランプの色が異なります。
通常モード 青の点灯
会話モード 緑の点灯
テレビモード 赤の点灯

通常／会話／テレビモードを使うときは


- ①モードボタンを押す
モードランプが点灯
モードボタン
- ②モードランプ点灯中にもう一度モードボタンを押す
選みたいモードの色になるまでモードボタンを繰り返し押す。
青 → 緑 → 赤
ランプは10秒ほどで消灯します。

電話モードを使うときは(本機を付けたまま電話するときは)

- ①受話器をマイク穴の周りに近づける
マイク穴
受話器
- ②モードボタンを2秒間以上長押しする
緑に点滅したら指を離す
遅い点滅になったら OK
モードボタン
- ③通話が終わったら、モードボタンを短く押す元の聴こえモードに戻ります。

音楽プレーヤーなどを聞く

付属の外部入力用コードを音楽プレーヤーなどに接続すると、周りの音を聞くと同時に音楽も聞けます。

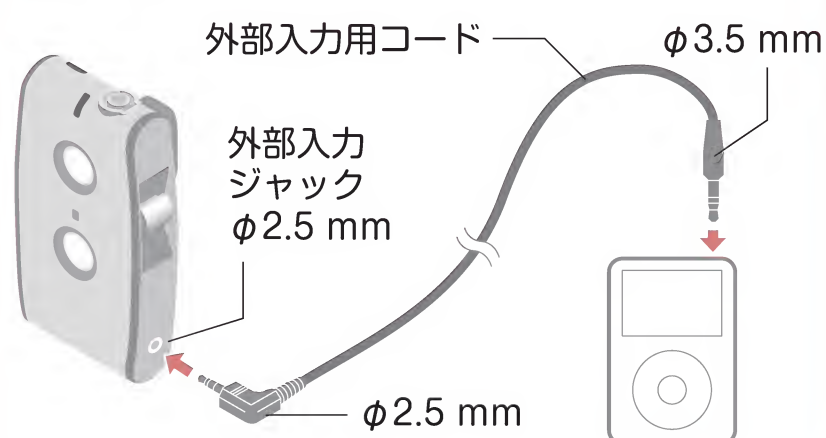

ランプ表示の見かた

電源ランプ

- ・青色の点灯：本機の電源がオンになっています。(通常の状態です。)
- ・赤色の点滅：電池残量が少なくなっています。充電してください。

電池残量が少ないときは、イヤホンからも「ピピッ」という音が3回、30秒ごとに出てお知らせします。

モードランプ

現在の聴こえモードを確認できます。

- ・青色の点灯：通常モード
- ・緑色の点灯：会話モード
- ・赤色の点灯：テレビモード
- ・緑色の点滅：電話モード

④ 終了

使い終わったら電源を切ります。

電源を切る

電源ボタンを押す

